


Émetteur TV Starkey

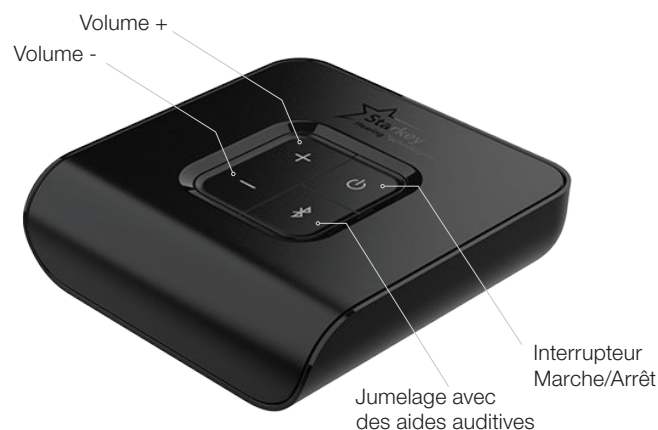


Jumelage

L'Émetteur TV Starkey doit être jumelé aux aides auditives 2,4 GHz afin de communiquer avec elles. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et l'émetteur TV se reconnaissant ensuite automatiquement. L'émetteur TV peut être jumelé dans ou en dehors d'Inspire™ X.

Jumelage dans Inspire X

- 1 Lancez Inspire™ X puis connectez les aides auditives afin de les détecter.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** dans la barre de navigation de gauche.
- 3 Veillez à ce que l'émetteur TV soit allumé.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm de l'émetteur TV.
- 5 Activez le mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage. Le voyant clignote rapidement en bleu.
- 6 Sélectionnez **Jumeler** pour mettre les aides auditives en mode jumelage (A).
- 7 Le jumelage est effectif lorsque l'image de l'émetteur TV apparaît sur l'écran (B).
- 8 Ouvrez le menu déroulant sous la fenêtre Accessoires de streaming pour sélectionner « Micro d'aide auditive en cours de streaming » (C).
- 9 Cliquez sur l'icône « Information » pour obtenir plus de détails sur le processus de jumelage, le cas échéant (D).

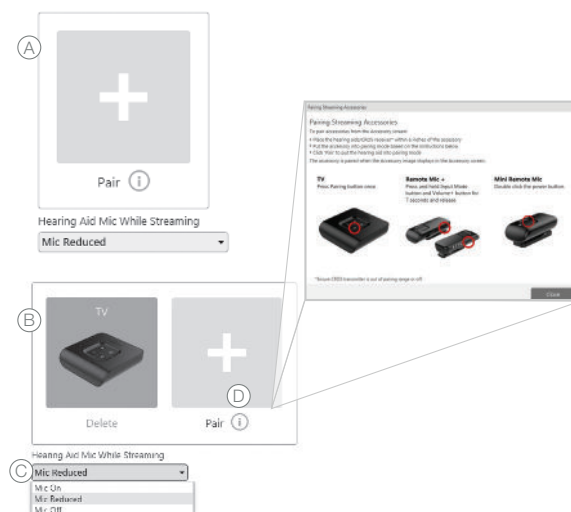


Jumelage en dehors d'Inspire X

- 1 Éteignez tout téléphone mobile ou autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Veillez à ce que l'émetteur TV soit allumé.
- 3 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm de l'émetteur TV.
- 5 Activez le mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage. Le voyant clignote rapidement en bleu.
- 6 Un voyant vert clignotera pour chaque aide auditive pour confirmer que le jumelage est effectif. L'émetteur TV reconnaîtra si le raccord est monaural ou binaural et fera le jumelage d'une ou deux aides auditives.




Configuration

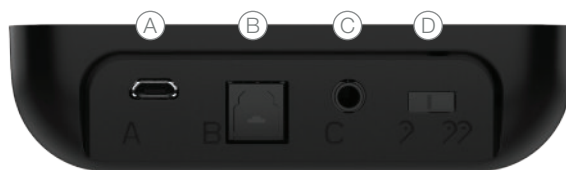

- (A) Prise d'alimentation (microUSB) (B) Prise Toslink optique (C) Prise analogique câble 3.5mm (D) Interrupteur Mono/Stéréo

- 1 Retirez les capuchons en plastique présents aux deux extrémités du câble TOSLINK.
- 2 Branchez un câble TOSLINK dans la prise de sortie audio de votre source audio électronique. S'il n'y a pas de prise de sortie audio TOSLINK, utilisez un câble 3,5 mm vers RCA.
- 3 Allumez votre source audio électronique.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble TOSLINK à l'arrière de l'émetteur TV (B).
- 5 Insérez le connecteur micro-USB de l'adaptateur d'alimentation à l'arrière de l'émetteur TV (A).
- 6 Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale.
- 7 Allumez l'émetteur TV. Un voyant vert fixe indique que l'appareil est sous tension.
- 8 Si le voyant avant s'éclaire en bleu fixe, l'émetteur TV a détecté du son et le transmet.

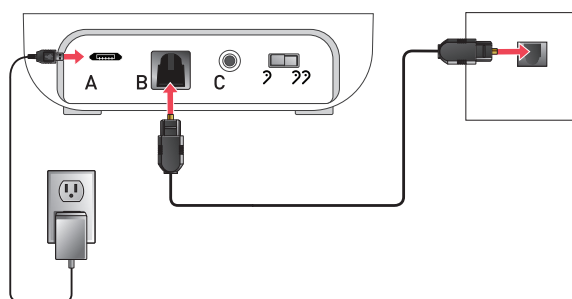

Utilisation

Un nombre illimité d'utilisateurs d'aides auditives 2,4 GHz sur la plateforme Thrive peuvent se connecter à l'émetteur TV en même temps, ce qui leur permet de partager la même expérience d'écoute. L'émetteur TV prend en charge les entrées analogiques et numériques et peut être connecté avec succès à de nombreuses sources audio électroniques, y compris les téléviseurs, les ordinateurs, les lecteurs MP3, les lecteurs DVD, les décodeurs, Bluetooth® ou Amazon Echo et Echo Dot (Jack 3,5 mm).

Volume

Le niveau du volume audio diffusé peut être ajusté via le contrôle de l'utilisateur de l'aide auditive, l'émetteur TV, la télécommande ou l'application Thrive Hearing Control.¹

Streaming audio

Le streaming audio à partir de l'émetteur peut être démarré (ou arrêté) de plusieurs façons :

- Contrôle utilisateur de l'aide auditive : appuyez et maintenez ou appuyez deux fois²
- Télécommande : appuyez sur le bouton Favori
- Application Thrive

Le streaming audio s'arrêtera également si :

- L'émetteur TV est éteint.
- Un appel via un téléphone mobile ou du Microphone + est reçu. Une fois l'appel téléphonique terminé, le streaming s'arrête. Si vous le souhaitez, le streamer TV devra être redémarré manuellement.
- Si l'utilisateur sort de la portée de l'émetteur TV (jusqu'à 15 mètres) le streaming s'arrête et devra être redémarré manuellement.

¹Les accessoires sont uniquement jumelés aux aides auditives (pas à l'iPhone/applications). ²La fonction Double Tap n'est disponible que sur les aides auditives AI. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Starkey est sous licence. Amazon Echo et Echo Dot et tous les logos et marques et mentions associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Thrive, Starkey Hearing Technologies, le logo Starkey et Inspire sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.